HAN 05A – vel.2

Polohovací kolébka - omyvatelná

Rozměry: 63 x 40 x 12 cm
Výplň: PPUR 120
Obal: PES úplet s nánosem PUR

handicap
ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Polohovací kolébka je určena k otáčení a polohování pacientů, čímž usnadňuje ošetřovatelům hygienickou péči o pacienta. Umožňuje snadno změnit polohu na lůžku a předcházet vzniku proleženin.

Povlak kolébky je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu opatřeného zipem pro jednoduché sundání.

Dlouhodobě doporučujeme výrobek nepoužívat v přímém kontaktu s kůží. Materiál má z lícové strany přirozenou protiplísňovou a antibakteriální úpravu, je neprodyšný a nepromokavý.

Pokyny k údržbě: Povlak kolébky lze snadno otřít desinfekčním roztokem. V případě potřeby lze povlak sejmout a prát se zapnutým zipem na 95°C bez aviváže.




Složení: Polyuretan (PUR) 96%, polyester (PES) 4%

LIKVIDACE
Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.




Návod k použití:


I. Nadzvedněte pacientovi dolní končetiny **1** a vložte polohovací kolébku do podkolenní oblasti **2**.

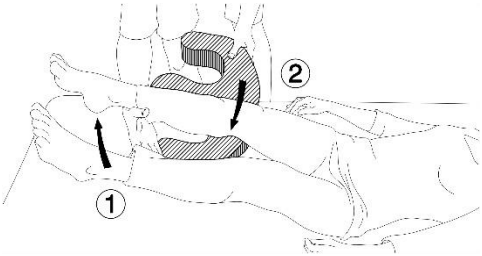

II. Obraťte kolébku tak, aby končetiny zůstaly ve výřezech **3**.

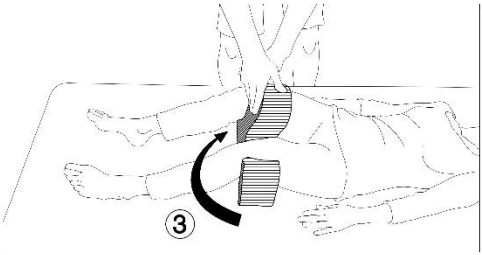

III. Uchopte kolébku jednou rukou za poutko a druhou rukou přidržujte pacienta za bok. Pomocí poutka otočte pacienta do požadované polohy **4**.

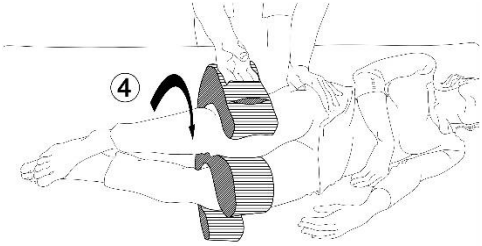

IV. Stejným způsobem postupujte při polohování do výchozí polohy **5**.

